

DENTES DE POLÍMERO SINTÉTICO PARA PRÓTESES DENTÁRIAS

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.

Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, tirar o brilho da base do dente com uma ferramenta abrasiva. Após isolamento da mufla e antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com monômero de metilmetacrilato.

Recomendações ao paciente: Para aumentar a durabilidade dos dentes é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas como ácidos ou álcalis.

Composição: Polimetilmetacrilato - EDMA - Fluorescente - Pigmentos Biocompatíveis.

Armazenagem: Conservar ao abrigo de luz e calor.

Embalagem: 16 Placas anteriores ou 12 Placas posteriores.

SYNTHETIC POLYMER TEETH FOR DENTAL PROSTHESIS

Follow the usual procedures for choice, waxing-up, articulation, polymerization, infection-control and maintenance of the prosthesis, as well as for individual protection.

For an optimized bonding to the denture base resin, grind the tooth base with a grinding instrument. After insulating the flask and prior to pack the acrylic dough, clean the base surface of the tooth using methylmethacrylate monomer.

Indications for the patient: To increase the teeth durability it is highly recommended to avoid contact with alkalis, acids or other substances that can damage acrylic materials during the daily hygiene.

Composition: Polymethylmethacrylate - EDMA - Fluorescent - Biocompatible Pigments.

Storage: Keep protected from light and heat.

Packing Units: 16 anterior sets or 12 posterior sets.

DIENTES DE POLÍMERO SINTÉTICO PARA PRÓTESIS DENTALES

Seguir los procedimientos usuales para selección, montaje, articulación, polimerización, control microbiológico y mantenimiento de la prótesis, tanto como para protección individual.

Para mejorar la adhesión de los dientes a la base de la prótesis se debe eliminar el brillo de la base del diente con una herramienta abrasiva. Después de aislar la mufla y antes de aplicar la resina, limpiar la base de los dientes con monómero de metilmetacrilato.

Recomendaciones al paciente: Para aumentar la duración de los dientes es recomendada una higienización diaria sin usar sustancias agresivas como ácidos o álcalis.

Composición: Polimetilmetacrilato - EDMA - Fluorescente - Pigmentos Biocompatibles.

Almacenamiento: Conservar protegido de luz y calor.

Embalaje: 16 placas anteriores o 12 placas posteriores.

NEW DENT

Catálogo de formas
Mould chart
Carta de formas

Dentes Acrílicos
Acrylic Teeth
Dientes Acrílicos

Dupla ligação cruzada
Fluorescentes

Double crosslinked
Fluorescent

Doble ligación cruzada
Fluorescentes



VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Ltda.
Rua Carlos Tassoni, 4521 - Distrito Industrial - Caixa Postal 48 - CEP 13.633-418 - Pirassununga - São Paulo - Brasil
Fone: + 55 (19) 3565-5656 - Fax: + 55 (19) 3565-5650 - sac@vipi.com.br - www.vipi.com.br
C.N.P.J.(MF) 49.425.259/0001-73 - Inscr. Est. 536.012.208.119 - Indústria Brasileira

A: 02/10 - 12092

Fotos: Eduardo Miura

Empresa Certificada
ISO 13485:2003/ ISO 9001:2000



Anteriores Superiores - Upper Anteriors

3 M

(L1) 37,6
(L2) 6,9
(HI) 9,2



2 D

(L1) 41,0
(L2) 7,5
(HI) 9,4



3 N

(L1) 42,4
(L2) 7,9
(HI) 10,0




3 P

(L1) 47,0
(L2) 8,4
(HI) 10,8



A 25

(L1) 44,0
(L2) 8,4
(HI) 9,6

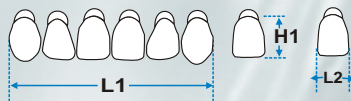

A 26

(L1) 46,7
(L2) 9,0
(HI) 9,6



264

(L1) 44,2
(L2) 7,9
(HI) 10,7



266

(L1) 47,9
(L2) 9,0
(HI) 12,2



38

(L1) 50,3
(L2) 9,3
(HI) 11,4



Posteriores Superiores - Upper and Lower Posteriors

30 M (L5)29,4 (L6)8,1 (L7)31,0 (L8)8,8



32 M (L5)30,8 (L6)8,3 (L7)32,6 (L8)8,7



30 L (L5)29,8 (L6)8,5 (L7)31,2 (L8)9,0



32 L (L5)31,6 (L6)8,5 (L7)34,0 (L8)9,4



34 L (L5)33,1 (L6)8,7 (L7)36,1 (L8)9,5

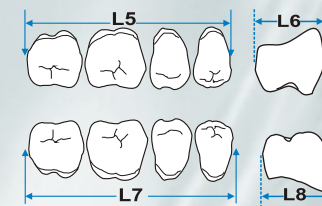


TABELA DE ARTICULAÇÃO ARTICULATION CHART

Anteriores Superiores Upper Anteriors	Anteriores Inferiores Lower Anteriors	Posteriores Superiores Upper and Lower Posteriors
3M	2D	30M
2D	2D	30L/30M
3N	3N	30L/32M
3P	3P	32L/32M
A25	3N	30M/32M
A26	A26	32M
264	3N	32L/32M
266	266	34L
38	266	34L

Anteriores Inferiores - Lower Anteriors

2 D

(L3) 30,7
(L4) 4,7
(H2) 9,2



3 N

(L3) 32,4
(L4) 5,0
(H2) 9,4



3 P

(L3) 35,8
(L4) 5,7
(H2) 9,9



A 26

(L3) 35,3
(L4) 5,5
(H2) 8,7



266

(L3) 36,6
(L4) 5,7
(H2) 11,4



ESCALA DE CORES - SHADE GUIDE GUÍA DE COLORES

60 - 62 - 66 - 69

**NEW
DENT**